

上海鑫睿实验室设备系为您提供从实验室建设咨询、技术研发、工艺设计、智造生产、EPC（工程总承包）、项目管理及后期运维服务为一体的“一站式”实验室全流程解决方案！自创品牌“Sinrise”

“鑫睿”，20年实验室设备系统供应商，实验室设计改造,家具定制,实验仪器设备,耗材一体化服务商。

如果您想新建、改建、扩建实验室，以更好地适应您团队或研究的需求，请访问我们的网站或致电服务热线 18621564269

## 1.实验桌（分类：靠边桌、水槽桌、中央桌、转角桌等）

### 1.1.全钢实验桌规格及简单工艺说明：SRL-SV

**全钢结构:**外形美观，现代感强，结构稳固，使用寿命长；可拆卸，利于电气维修和清洁卫生，具有最佳的经济性能比，是现代实验室的首选产品。

**台面:**采用实验室专用 12.7mm 实芯理化板，边缘双加厚至 25.4mm,台面底部做有防水槽，水池台上面做 100mm 高档水板，结构紧固致密，能抗强冲击，耐强酸碱更具有良好的承重性能。

**箱体:**采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。焊点牢固、平整、光滑并做防锈处理。水平可调地脚高度 0—50mm。

**轨道:**三节静音滚珠导轨，或带阻尼静音滚珠滑轨。

**拉手:**不锈钢一体成形一字拉手、不锈钢拉手、PVC 内嵌扣手。

**铰链:**采用优质铝合金铰链铰，开启度为 180 度。

**调整脚:**可调节，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强。

**试剂架:**主框架采用 40mm×100mm，壁厚 1.5mm 方形钢管制成，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用 12mm 厚的单面磨砂玻璃，不锈钢管做护栏，层板高低可调节。（颜色款式规格可自选）

**试剂架:**主框架采用 40mm×100mm，壁厚 1.5mm 方形钢管制成，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用 12mm 厚的单面磨砂玻璃，不锈钢管做护栏，层板高低可调节。（颜色款式规格可自选）

**部分现场图:**







边桌 Table



抽屉柜 Drawer cabinet




吊柜 Hanging cabinet





实验桌及部分配件结构图：

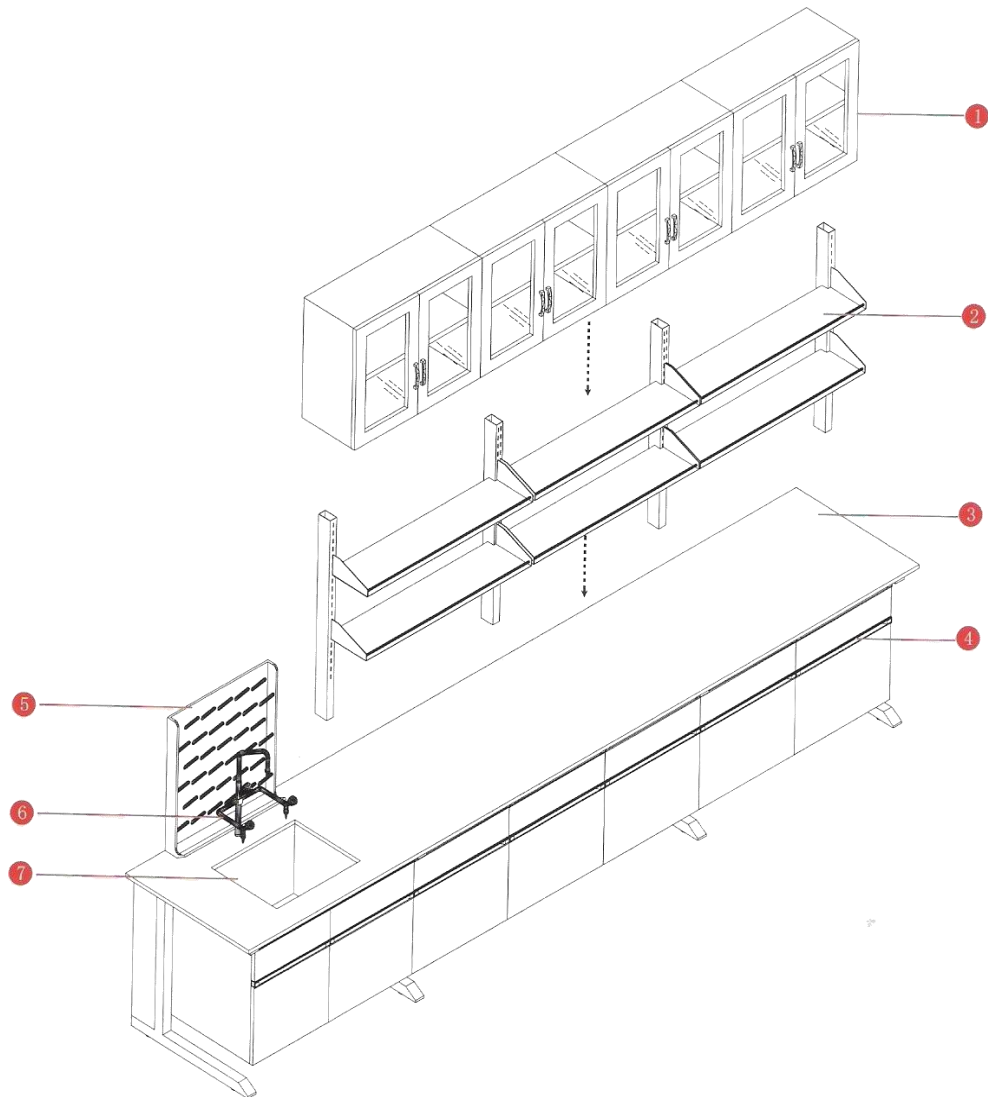

- (1)、吊柜(钢玻型 CS、全木型 CW)
- (2)、试剂架/药品架(钢玻型 FS、全木型 FW)
- (3)、台面(理化板 LH、环氧树脂 HY、陶瓷 TC、不锈钢 SS、玻璃 GL) (4)、柜体主材 (全不锈钢 SS、钢制烤漆 SV、钢木 SW、塑料 PP) (5)、滴水架 (PP 材质)
- (6)、化验水龙头 (PP 材质、不锈钢材质)
- (7)、水槽(PP 水槽 WP、不锈钢水槽 WS)





## 全钢结构

ALL-STEEL


外形美观，现代感强，结构稳固，使用寿命长；可拆卸，利于电气维修和清洁卫生，具有最佳的经济性能比，是现代实验室的首选产品。

## 台面

MESA

采用实验室专用

12.7MM实芯理化板，边缘双加厚至25.4MM,台面底部做有防水槽，水池台上面做100MM高档水板，结构紧固致密，能抗强冲击，耐强酸碱更具有良好的承重性能。

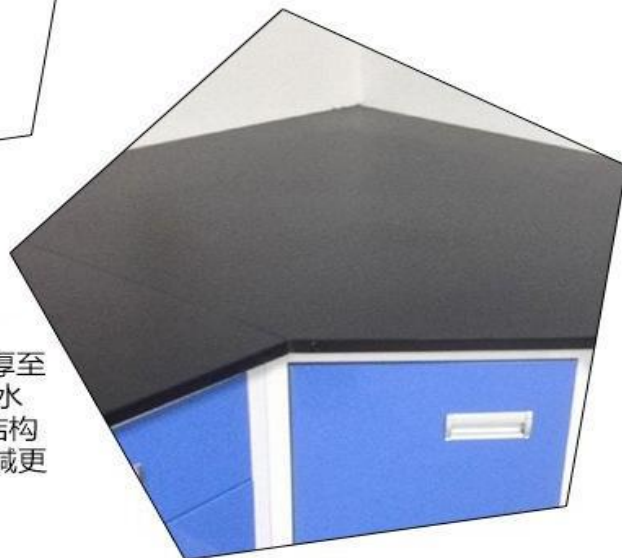

## 箱体


CASE

采用 1.2 MM厚优质冷轧钢板折弯成型，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。焊点牢固、平整、光滑并做防锈处理。水平可调地脚高度0—50MM。

## 试剂架

REAGENT RACK

主框架采用40MM×100MM，壁厚1.5MM方形钢管制成，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12MM厚的单面磨砂玻璃，不锈钢管做护栏，层板高低可调节。（颜色款式规格可自选）

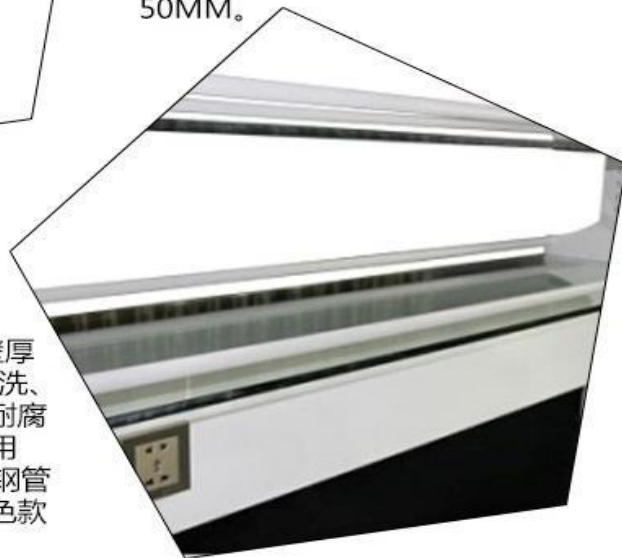

18621564269



info@sinrise.cn



https://www.sinrise.cn



QQ : 2355607607



上海市青浦区五厍浜路 206 号 /

版权所有 侵权必究

版本 SR8019

第 1-5 - 页



## 1.2. 钢木实验桌规格及简单工艺说明：SRL-SW

**台面：**采用实验室专用耐酸碱实芯理化板，台面底部做有防水槽，水池台上面做 100mm 高档水板，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱更具有良好的承重性能。

**钢制框架：**采用 40×60mm、壁厚 1.5mm 方形钢管制成的 C 型框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好，使用寿命长。

**箱体、吊柜部分：**柜体间转角将根据产品的内部结构，采用三合一锁件结构连接。

**门板、抽屉面板：**采用 15mm 厚优质三聚氰胺中密度板，外贴实验室专用防火板，周边以 2mm 厚 PVC 封边条封边，黏结牢固耐用。

**基板：**采用 15mm 厚三聚氰胺中密度板，周边采用 PVC 封边条封边，后板可灵活拆卸，利于隐藏水电管道的维护修复。

**层板：**采用 15mm 厚三聚氰胺中密度板，周边采用 PVC 封边条封边，活动结构，可调节相对高度。通用配件：

**线槽：**用于实验室配电设施，采用铝合金材料，模具制作，表面为静电粉末喷涂，可满足电源线、电话线、网络线等综合布线方面的要求，可将实验室内各种功能布线均布置在线槽内，以达到规范标准、便于维护管理的目的。

可用于试剂架的电控系统，也可用于墙上安装电源插座等使用。

**铰链：**采用 175 度铰链。

优点：①最大承重力达 45Kg；

②开合最少达十万次以上，使用寿命长，耐腐蚀性能强。滑

**轨：**采用三节静音滑轨。

优点：开合达八万次以上，使用寿命长，滑轨畅顺及静音效果佳。把

**手：**采用铝合金封边一字型扼手。

**可调地脚：**采用改性硬聚氯乙烯地脚（可调节 0~30mm），外加防腐伸缩套。

优点：具有耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点，特别是防震效果佳，且防腐伸缩套可多层保护地脚，使其免受外部气体腐蚀，更提升产品的时代感。

**插座：**独立式插座盒配国际电工并配置安全保护盖板，可适用任何仪器的插头。竖



固螺丝：采用不锈钢螺丝。



部分现场图：





### 1.3. 全木实验桌规格及简单工艺说明：SRL-WD

**台面：**采用实验室专用耐酸碱实芯理化板，台面底部做有防水槽，水池台上面做 100mm 高档水板，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱更具有良好的承重性能。

**柜体部分：**采用 18mm 厚 E1 级别优质三聚氰胺板，所有断面采用优质 PVC 全自动封边机封边，四边倒角圆滑处理。

**层板：**采用 15mm 厚三聚氰胺中密度板，周边采用 PVC 封边条封边，活动结构，可调节相对高度。通用配件：

**线槽：**用于实验室配电设施，采用铝合金材料，模具制作，表面为静电粉末喷涂，可满足电源线、电话线、网络线等综合布线方面的要求，可将实验室内各种功能布线均布置在线槽内，以达到规范标准、便于维护管理的目的。

可用于试剂架的电控系统，也可用于墙上安装电源插座等使用。

**铰链：**采用 175 度铰链。

优点：①最大承重力达 45Kg；

②开合最少达十万次以上，使用寿命长，耐腐蚀性能强。滑

**轨：**采用三节静音滑轨。

优点：开合达八万次以上，使用寿命长，滑轨畅顺及静音效果佳。把

**手：**采用铝合金封边一字型扼手。

**可调地脚：**采用改性硬聚氯乙烯地脚（可调节 0~30mm），外加防腐伸缩套。

优点：具有耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点，特别是防震效果佳，且防腐伸缩套可多层保护地脚，使其免受外部气体腐蚀，更提升产品的时代感。

**插座：**独立式插座盒配国际电工并配置安全保护盖板，可适用任何仪器的插头。坚

**固螺丝：**采用不锈钢螺丝。

**部分现场图：**





#### 1.4. PP 实验桌规格及简单工艺说明：SRL-PP

我司新引进高端塑胶折弯机、塑胶碰焊机、NCN 雕刻机、精密推台锯。以进口 PP 板材为材料，新增开发 PP 系列实验室柜体。先后为多家实验室家具生产厂家、医院、大中院校、化工电镀行业、半导体科研单位、等大型工程。提供物美价优的配套 PP 功能柜体

公司以新研发的折弯技术将柜体连结唯一体，有效改善了国内一般传统拼接方式（结构松散，搬运 移位时散架等缺失），大大提升产品使用率，新的折弯技术改善了国内各地区温差大的现实情况，将柜 体门片冷缩热涨易变形的系数降至最低。

**柜体：**采用防腐 PP 聚丙烯瓷白色 8mm 材料制作，通过色焊条专业手动焊接而成，具半永久性，抗强酸、化学药品，



耐冲击，耐腐蚀，不生锈。

**台面：**采用 PP 聚丙烯瓷白色 15mm 材料制作。其他选项：实芯理化板、环氧树脂板、千思板、陶瓷板。



**吊柜：**采用防腐 PP 聚丙烯瓷白色 8mm 材料制作，通过同色焊条专业手动焊接而成。

**试剂架：**采用防腐 PP 聚丙烯瓷白色 10mm 材料制作，通过同色焊条专业手动焊接而成。**滑轨：**

采用纯手工焊接而成，带自滑系统；

**拉手：**采用 PP 磨具一次性注塑而成，合


页：采用 PP 磨具一次性注塑而成。

**插座：**采用 PP 磨具一次性注塑而成，带防水功能，配置优质多功能插座。10A、20A、30A 柜体

**连接方式：**高强度尼龙螺丝。

产品特性：整体防腐，美观大方，便于拆装，使用寿命一般情况下为 10 年以上。

**部分现场图：**

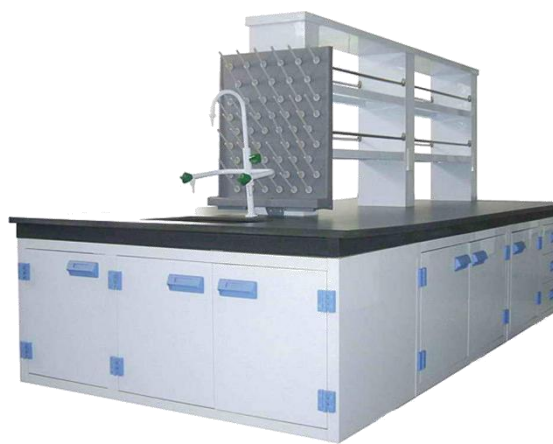

## 1.5. 不锈钢实验桌规格及简单工艺说明：SRL-SS

**台面部分：**1.2mm 厚不锈钢（SUS304）制作，表面经钝化处理，内衬 25mm 厚密度板，整体厚度为 28mm。水槽安装方式为台下盆，水槽柜台面四边加装防溢条，以防台面积外溢。若不慎有水外溢，台面板前端下部设有止水槽，以确保柜体不受水侵。

**不锈钢柜体部分：**采用 1.2mm 厚优质不锈钢板，全自动一体折弯成型，外形美观大方。

**背板：**采用 1.0mm 厚优质不锈钢板，并采用活动结构，安装预埋螺母，易拆装，便于水、电、气等管线的安装、检修。

**拉手：**不锈钢一体成形一字拉手或不锈钢拉手。 **铰**

**链：**采用优质不锈钢铰链，开启度为 180 度。 **导轨：**

三节静音不锈钢制作的定制导轨。

**调整脚：**不锈钢地脚，可调节。

部分现场图：



## 1.6 实验桌尺寸规格

### 边桌例

规格	1000*750*800 mm	1000*750*850 mm	按空间需求定制尺寸
规格	1000*800*800 mm	1000*800*850 mm	按空间需求定制尺寸
规格	1000*900*800 mm	1000*900*850 mm	按空间需求定制尺寸

### 中央桌例

规格	3000*1500*800 mm	3000*1500*850 mm	按空间需求定制尺寸
----	------------------	------------------	-----------

### 转角桌例

规格	1000*1000*800 mm	1000*1000*850 mm	按空间需求定制尺寸
规格	1050*1050*800 mm	1050*1050*850 mm	按空间需求定制尺寸
规格	1150*1150*800 mm	1150*1150*850 mm	按空间需求定制尺寸

## 1.7. 导轨及把手材质说明:



平板拉手



D型拉手



## 1.8 颜色选择



颜色，以其无所不在的身姿，一直刺激着我们的视觉，影响我们的心情，改变我们的情绪，构架着整个实验室的空间……

黑色与灰白：大方、现代感强，强化了高雅和庄重。


灰色与灰白：明朗、自信、高贵、一种德高望重的自信显露，营造出实验室庄重而不失华丽的贵族气息。 黑色与湛蓝：接近自然地精神，装点端庄，营造出一份“静、洁、雅”的气氛。

铁灰与湛蓝：和谐、平静、古典与优雅的结合，再现了自然与品位的完美。

灰色与翡翠绿：纯朴、理智、安心的心情自然流露，宁静致远，时刻感受它极具生命力的环保主张。 灰

色与宝蓝：清新、活泼、不拘一格的全新活力，演绎视觉最高境界。

墨绿与灰白：凝聚了生长的形式与美，流露出卓尔脱俗的气质，形成浑然一体的和谐。

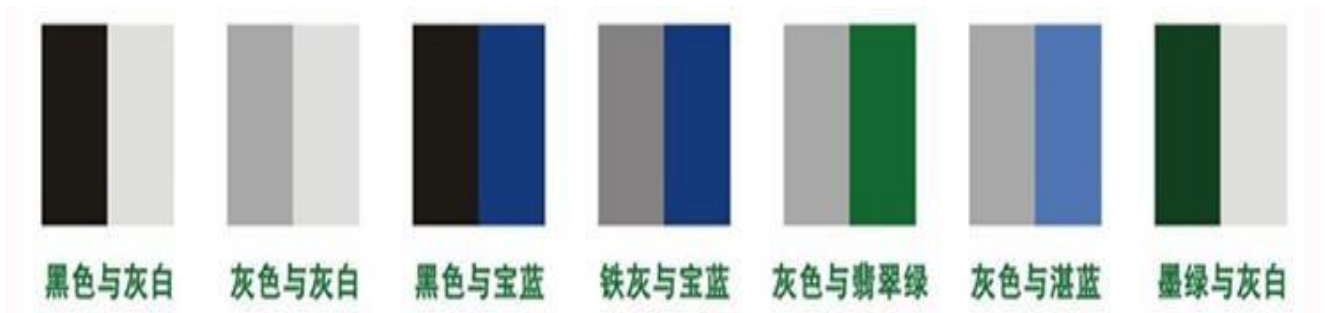

本档版权为上海鑫睿实验室设备系统有限公司所有，任何复制引用行为，请保留底部版权信息，感谢您对上海鑫睿实验室设备的支持与厚爱。

